



**Anleitung zur Systemkonfiguration und
Installation der Client-Programme
an den Arbeitsplätzen**

Zur Installation der Programme an Ihren zusätzlichen Arbeitsplätzen führen Sie bitte die nachfolgend beschriebenen Arbeitsschritte aus.

Hinweis: Für die Installationen melden Sie sich bitte mit einem Windows-Benutzer an, der administrative Rechte hat!

Beachten Sie vor der Installation die Empfehlungen für die Windows-Konfiguration (gesonderte Anleitung) und führen diese entsprechend aus.

Systemkonfiguration	
Am Server sollte ein Ordner C:\Forum (oder D:\Forum) angelegt und als FORUM mit Vollzugriffsrechten frei gegeben sein. Wenn Ihre vorhandene Systemkonfiguration nicht dieser Standard-Installation entspricht, müssen Sie die Eingaben bei der Client-Installation entsprechend ändern.	
Netzwerk- Arbeitsplatz-PC :	➤ Stellen Sie ein Netzlaufwerk S: mit dem am Server als FORUM freigegebenen Ordner her. (Netzwerkumgebung, Netzlaufwerk verbinden, Laufwerk = S:, Pfad = \\<servername>\FORUM und die Funktion „Verbindung beim Start wieder herstellen“ aktivieren). ➤ Die Bildschirmanzeige ist auf min. 1280x1024 zu setzen, empfohlen ist aber eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080.

Installation der Client-Software

Das Installationsprogramm **CF.Client.exe**, welches sich unter „S:\cfsetups“ befindet, beinhaltet derzeit folgende Programme:

- Installation von gemeinsam genutzten Dateien
- dental Vision (Installation ist lizenzabhängig, nur für Bestandsinstallationen)
- eArchiv (Installation ist lizenzabhängig)
- eTimer (Installation ist lizenzabhängig)
- express Organizer (Installation ist lizenzabhängig)
- Drucker „CFPDF“ für das Dokumentenarchiv (Installation ist lizenzabhängig)

Starten Sie die Installation und wählen Sie bei der Installation „Standard“ aus.

Erscheint bei der Installation eine Meldung, ob die Gerätesoftware „Artifex Software Inc. Drucker“ installiert werden soll, so bestätigen Sie diese mit der Schaltfläche „Installieren“ bzw. „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.

Installation der Software ortho Express / dental Express

Client installieren :
(Arbeitsplatz in Netzwerken)

- Starten Sie das Installationsprogramm **ClientSetupExpress.exe**, welches sich je nach Installationsart am Server entweder unter „S:\cfprog\Express\Setups“ oder „S:\Express\Setups“ befinden sollte.
- Wählen Sie in der Startmaske, falls angeboten, entsprechend Ihrem erworbenen Produkt eine der folgenden Schaltflächen an:
 
- Bestätigen Sie die Bildschirm-Meldungen mit [Weiter] bis Sie zum Punkt „**Installation beginnen**“ gelangen. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Pfadvorgaben gewissenhaft, bevor Sie mit der Installation der Programmdateien fortfahren (i.d.R. passen die Vorgaben).
- Sollten Sie mit den vorgeschlagenen Angaben nicht zufrieden sein, können Sie über die [Zurück]-Schaltflächen wieder bis zur Willkommen Maske gelangen, in der Sie dann den Haken für „benutzerdefiniert“ setzen und so im weiteren Ablauf durch detaillierte Eingabemasken geführt werden.
- Nach Bestätigung der Zusammenfassung Ihrer Einstellungen unter „**Installation beginnen**“ werden die Programmdateien installiert.
- Wenn Sie nach Abschluss der Installation das **ortho Express-** bzw. **dental Express-**Programm zum ersten Mal aufrufen, wird automatisch an jedem Arbeitsplatz ein Powermodul-UPDATE ausgeführt, bevor Sie das Programm starten können.

Druckereinrichtung

Für die an den jeweiligen Arbeitsplätzen benötigten Drucker installieren Sie bitte die Windows-Druckertreiber und stellen Sie für den Windows-Druck anschließend das Druckerprofil im **ortho Express**- bzw. **dental Express**-Programm mit Hilfe der „Anleitung zur Druckereinstellung“ ein.

Installation der Software express Timer (sofern vorhanden)

Client installieren :

(Arbeitsplatz in Netzwerken, auf einem Einzelplatz oder Terminalserver einrichten)

- Starten Sie das Installationsprogramm **ClientSetupExpress.exe**, welches sich je nach Installationsart am Server entweder unter „S:\cfprog\ExpressTimer\Setups“ oder „S:\ExpressTimer\Setups“ befinden sollte.
- Bestätigen Sie die Bildschirm-Meldungen mit [Weiter] bis Sie zum Punkt „**Installation beginnen**“ gelangen. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Pfadvorgaben gewissenhaft, bevor Sie mit der Installation der Programmdateien fortfahren (i.d.R. passen die Vorgaben).
- Sollten Sie mit den vorgeschlagenen Angaben nicht zufrieden sein, können Sie über die [Zurück] Schaltflächen wieder bis zur Willkommen Maske gelangen, in der Sie dann den Haken für „benutzerdefiniert“ setzen und so im weiteren Ablauf durch detaillierte Eingabemasken geführt werden.
- Nach Bestätigung der Zusammenfassung Ihrer Einstellungen unter „**Installation beginnen**“ werden die Programmdateien installiert.
- Bestätigen Sie die Abfragen bei der Installation der Borland Database Engine (BDE) jeweils mit [Weiter].
- Um eine auf dem Server gespeicherte Konfiguration zu importieren starten Sie aus dem Windows Startmenü das Programm „WS Anzeige Schema kopieren“, welches Sie unterhalb des Menüpunkts „express Timer“ finden

Wir empfehlen Ihnen, einige Einstellungen unter Windows bzgl. Leistung und Netzwerkverhalten vorzunehmen.

Auf unserer Webseite können Sie sich hierfür unter dem folgenden Link das Programm „CF Windows Check“ zum Prüfen und Einstellen herunterladen.

<https://computer.forum/service/programme>

Arbeitsplatz-ID in ortho Express / dental Express einrichten

Um mit **ortho Express**- bzw. **dental Express** Versichertenkarten lesen oder EBZ-Pläne/Mitteilungen senden zu können, ist es erforderlich, eine gültige Arbeitsplatz-ID einzutragen. Diese leitet sich aus den Aufrufkontexten ab, die in den Einstellungen von easyTI ersichtlich sind.

Um die Arbeitsplatz-ID in **ortho Express**- bzw. **dental Express** einzutragen, klicken Sie in der Patientenauswahlliste auf „Karte einlesen“.



Buttons: Neuer Patient, **Karte einlesen**, OK, Beenden

☐ nur Kontrollaufruf

nur Ansicht

Pat.-Nr.	Name	Vorname	GebDat.	G.	Kasse	Status	A.	KFO	KFO-RG	ZA-RG	Br
9974	9974 Must...	Phil	29.09.2005		59	F	1	B/b	602	Bema	
9975	9975 Must...	Rida	05.07.2008	M	59	F	1	B/b	Bema	Bema	
9976	9976 Must...	Felicia	14.01.2007	W	270	F	1	B/b	Bema	Bema	
9977	9977 Must...	Philipp	03.09.2004	M	59	F	1	B/b	Bema	Bema	
9978	9978 Must...	Jason	01.01.2005	M	59	M	1	B/b	Bema	Bema	
9979	9979 Must...	Megan	19.03.2010	W	270	F	1	B/b	Bema	Bema	
997	997 Muste...	Sabrina	05.05.1989	W	59	M	1	V/r	Bema	Bema	

In dem folgenden Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche „SMC-B/HBA“.

Krankenversichertenkarte einlesen

Lese-Port / ArztNr (zugeordneter KZV-Abrechner) auswählen:
1001 / 1 Computer Forum GmbH

Bitte die Krankenversicherten-Karte zum Lesen einstecken!

Einlese-Datum: 04.02.26
für Quartal: 1/26
BKV eingelesen für 10/2025


Karte lesen
Abbrechen

eGK Daten Management aufrufen

SMC-B / HBA Konnektor/eHealth-Modul freischalten

Statusinformationen (bei Konnektor Nutzung)

Sofern noch keine Arbeitsplatz-ID an dem PC für **ortho Express**- bzw. **dental Express** festgelegt wurde, öffnet sich ein Fenster mit den Aufrufkontexten.

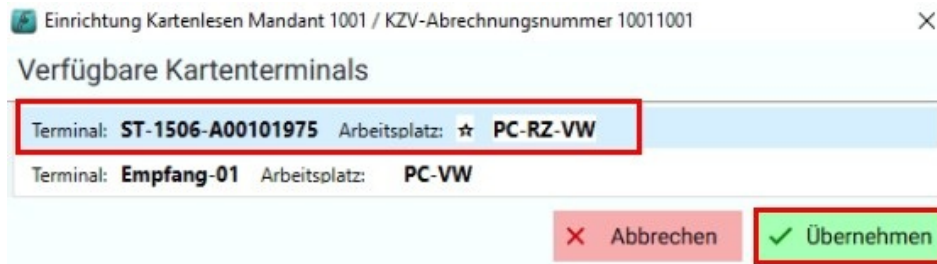

Einrichtung Kartenlesen Mandant 1001 / KZV-Abrechnungsnummer 10011001

Verfügbare Kartenterminals


Terminal: ST-1506-A00101975	Arbeitsplatz: ☆ PC-RZ-VW
Terminal: Empfang-01	Arbeitsplatz: PC-VW

Abbrechen Übernehmen

Wenn an dem PC später auch Versichertenkarten gelesen werden sollen, müssen Sie den Arbeitsplatz mit dem entspr. Terminal auswählen.

Sofern Sie nur EBZ-Pläne/Mitteilungen von dem PC versenden möchten, können Sie einen beliebigen Eintrag wählen, in der Regel den Standard (ersichtlich am Sternsymbol).

Wenn Sie den ausgewählten Eintrag durch Klick auf die Schaltfläche „Übernehmen“ übernommen haben, öffnet sich das Pin-Managementfenster.

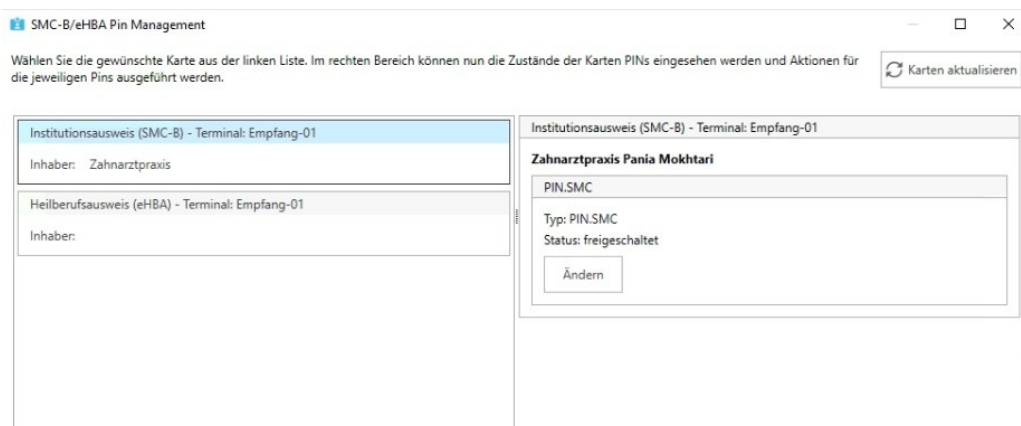

SMC-B/eHBA Pin Management

Wählen Sie die gewünschte Karte aus der linken Liste. Im rechten Bereich können nun die Zustände der Karten PINs eingesehen werden und Aktionen für die jeweiligen Pins ausgeführt werden.

Karten aktualisieren

Karte	Terminal
Institutionsausweis (SMC-B)	Empfang-01
Heilberufsausweis (eHBA)	Empfang-01

Inhaber: Zahnarztpraxis

Inhaber:

Institutionsausweis (SMC-B) - Terminal: Empfang-01

Zahnarztpraxis Pania Mokhtari

PIN.SMC

Typ: PIN.SMC

Status: freigeschaltet

Ändern

Dieses Fenster können Sie ohne weitere Aktion schließen und die Arbeitsplatz-ID wurde im **ortho Express**- bzw. **dental Express** erfolgreich festgelegt.